



آلیو® سیستم روغن های ICP-OES با حروف ربط ۵۰۰
آلیو سی ۵۰۰™ شمارنده ذرات مایع و

یک راه حل جامع برای یک آزمایشگاه روان

آویو ۵۰۰
ICP-OES
سیستم روغن

آزمایشگاه های تست روغن و روان کننده های در حال کار مانند آزمایشگاه شما همگی با چالش های یکسانی روبرو هستند - افزایش توان عملیاتی، بهبود دقت و کنترل هزینه های عملیاتی. اگر راهی برای رسیدن به اهدافتان و تغییر کامل روش کار شما وجود داشته باشد، چه؟ اکنون این راه وجود دارد.

در گذشته، شمارش ذرات و آنالیز عنصری به طور جداگانه انجام می شد که نیاز به زمان بیشتری برای آماده سازی نمونه، آنالیز و گزارش دهی داشت. از ابتدا پردازش می شد؛ ضایعات بیشتری در انتهای کار ایجاد می شد. به علاوه، به تنهایی می توانست تا 20 دقیقه برای هر نمونه طول بکشد. امروزه، راهکار یکپارچه ما انقلابی در گردش کار آزمایشگاهی ایجاد کرده و هزینه های عملیاتی را بهبود می بخشد.

ما شمارنده ذرات مایع LPC 500 همراه با اثبات شده سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES این فناوری نوآورانه به شما امکان می دهد تا هر دو آنالیز را در یک بار اجرا، با میانگین ۴۵ ثانیه برای هر نمونه و با کمتر از ۱ میلی لیتر نمونه، انجام دهید.

حالا یعنی یک تغییر دهنده بازی.



شمارنده ذرات مایع LPC 500

مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

دوآزمون، یک اجرا

علم خود را با تجزیه و تحلیل بهتر در زمان کمتر ساده کنید

وقتی صحبت از آنالیز روانکار می شود، بزرگترین چالش شما ممکن است آزمایش سایش و فلزات افزودنی باشد. تجزیه و تحلیل شمارش ذرات. اما اگر آزمایشگاه شما مانند اکثر آزمایشگاه ها باشد، فناوری های شمارش ذرات مستقل شما کند و دست و پا گیر هستند. به علاوه، آنها به نمونه زیادی نیاز دارند و زباله بیشتری تولید می کنند. راهکار جامع ما هر دو تحلیل را در یک اجرا ترکیب می کند. چطور است؟ که برای کارآمدی؟ در اینجا نحوه کار آن آمده است.

مرحله اول

آماده سازی روغن-A- رقیق کننده روغن

رقیق کردن نمونه های روغن برای آماده سازی جهت آنالیز فلزات سایشی و شمارش ذرات.

مزایا:

بهره وری و کارایی را بهبود می بخشد، انعطاف پذیری را برای دسترسی به نمونه اصلی شما فراهم می کند و در زمان صرفه جویی می کند.



مرحله دوم

نمونه بردار خودکار دوگانه 7400
Particle Xpress با Oils

قبل از نمونه برداری و تجزیه و تحلیل، نمونه ها را با ذرات هم بزنید.

مزایا:

افزایش توان عملیاتی نمونه؛ از طریق سیالات هدایت شده توسط سرنگ، تکرارپذیری نمونه به نمونه را فراهم می کند.



مراحل سه و چهار

ال پی سی ۵۰۰™ شمارنده ذرات مایع با Avio
سیستم روغن های ICP-OES 500

این دستگاه ها در کنار هم، شمارش ذرات و آنالیز سایش / افزودنی فلزات را در یک مرحله انجام می دهند.

مزایا:

افزایش توان عملیاتی، کاهش حجم نمونه و ضایعات و صرفه جویی در فضای آزمایشگاهی.



مرحله پنجم

سینجیستیک™ برای نرم افزار ICP

گزارش دهی برای آنالیز عنصری و شمارش ذرات را انجام می دهد.

مزایا:

بارابط کاربری بصری، راه اندازی سریع و آسان روش و انعطاف پذیری در انتخاب بین روش های مختلف، کارایی را بهبود می بخشد. فرمت های گزارش دهی



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی


تماس با ما

کشف با نوآوری آغاز می شود

آنالیز فلزات و ذرات سایشی در یک مرحله

آزمایشگاه های تست روان کننده های در حال کار مانند آزمایشگاه شما، هر روز در حال اندازه گیری، شمارش و شناسایی اثرات غلظت های کمتر و پایین تر آلاینده ها برای روان کننده های در حال کار هستند. اغلب، شمارش ذرات نیز برای نظارت و شناسایی ذرات با اندازه ها و غلظت های خاص که می توانند در خرابی دستگاه نقش داشته باشند، انجام می شود.

بنابراین چگونه راهکار دو در یک ما که در انتظار ثبت اختراع است، می تواند برای شما مفید باشد؟ ساده اما هوشمندانه است. با اضافه کردن شمارنده ذرات مایع LPC 500 به سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES، نمونه های روان کننده را می توان هم از نظر فلزات سایشی و هم از نظر ذرات، همه در یک مرحله تجزیه و تحلیل کرد. این به معنای توان عملیاتی بالاتر و نتایج دقیق تر در زمان کمتر است.

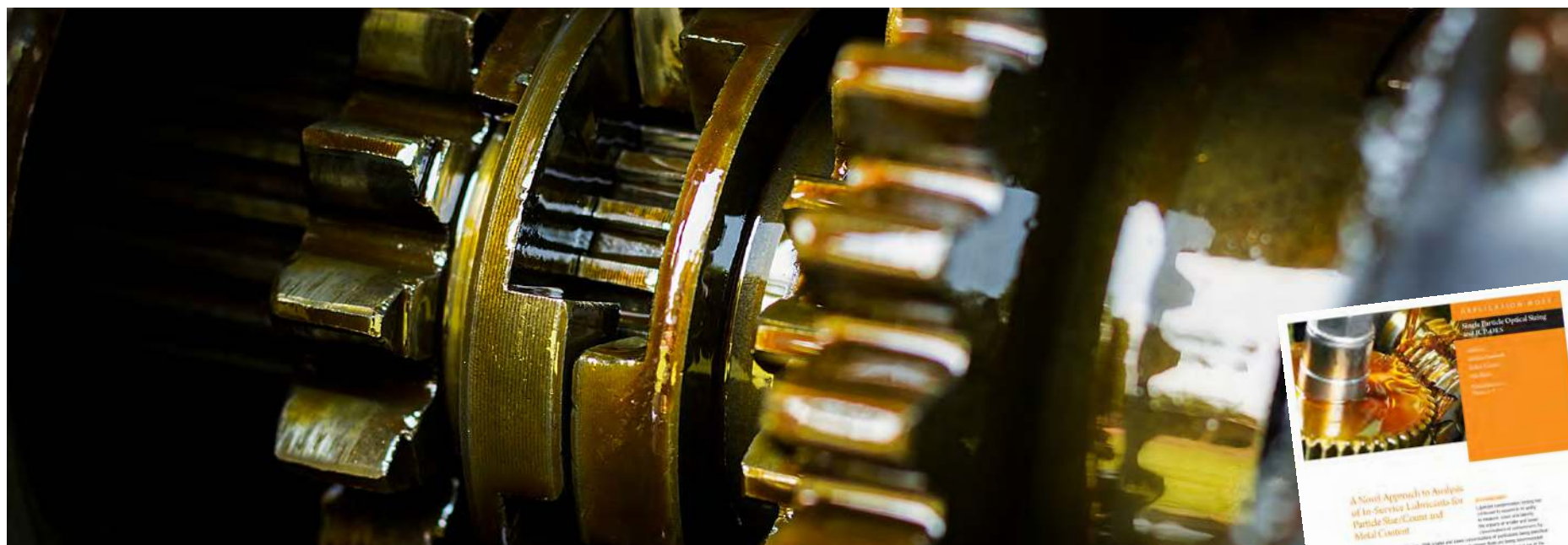

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندازه گیری، شمارش و شناسایی تأثیرات غلظت های کمتر و پایین تر آلاینده ها برای روانکارهای در حال کار، یادداشت درخواست ما را مطالعه کنید.

مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

مزایای راهکار یکپارچه ما

دو تحلیل، یک اجرا، بدون دخالت دست

دردنیای پایش وضعیت روغن، دو تحلیل حیاتی و جداگانه باید انجام شود. این عبارت که در انتظار ثبت اختراع است، با خط فاصله مشخص شده است. شمارنده ذرات مایع LPC 500 و قابل اعتماد سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES بگذارید هر دو را در یک اجرا آزمایش کنید.

سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES

- مشعل پلاسمای عمودی، عملکرد سریع و پایدار، نتایج قابل اعتماد و هزینه کم برای هر آنالیز را تضمین می کند
- فناوری پلاسمای Flat Plate™ ثبت اختراع شده، نیمی از آرگون سیستم های بار-کوئل را با همان پلاسمای قوی استفاده می کند.
- جمع آوری همزمان داده ها روی بیش از ۷۳ عنصر (طول موج های فرابنفش و مرئی) در عرض چند ثانیه برای دستیابی به توان عملیاتی استثنایی در نمونه

ICP برای نرم افزار Syngistix

- رابط کاربری مبتنی بر گردش کار که برای بهبود کارایی در آزمایشگاه طراحی شده است
- شمارش ذرات را می توان از روشی به روش دیگر فعال یا غیرفعال کرد
- برای انعطاف پذیری بیشتر، می توان قالب های گزارش دهی و اندازه های شمارش ذرات مختلفی را انتخاب کرد

تماشای نسخه نمایشی

برای تماشای ویدیو و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد سیستم خط تیره ما، اینجا کلیک کنید.

مایع LPC 500 شمارنده ذرات

- شمارش ذرات و نرخ اندازه گیری بیش از حد از ۱۰,۰۰۰ ذره کمتر در ثانیه g
- کوچکترین خودکار شمارنده ذرات ردپا در صنعت
- اتصالات درز اساساً ICP-OES برای آنالیز عنصری sis

در انتظار ثبت اختراع با خط فاصله راه حل

- دو آنالیز، یک اجرا - با آماده سازی نمونه واحد
- تجزیه و تحلیل نمونه به نمونه در کمتر از 45 ثانیه
- در هر آنالیز کمتر از 1 میلی لیتر نمونه روان کننده استفاده می کند
- تولید زباله کمتر برای آزمایشگاه

مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

شمارنده ذرات مایع LPC 500

برای شمارش و تعیین اندازه ذرات

فناوری نوآورانه و کارآمد اندازه گیری نوری تک ذرات (SPOS) ما برای تشخیص ذرات منفرد عبوری از یک ناحیه حسگر نوری بسیار نازک طراحی شده است. این فناوری نتایج تکرارپذیری را بین نمونه های با ویسکوزیته بالا و پایین ارائه می دهد و در عین حال نیاز به شستشو و هدررفت حلال را به حداقل می رساند.

The سیستم LPC 500 شامل سه جزء است: حسگر نوری، تحلیلگر پالس چند کاناله (MPA) و کنترل کننده نرم افزار. درباره مزایای هر یک بیشتر بخوانید.

حسگر نوری

با استفاده از دو روش - خاموشی نور (LE) و پراکندگی نور (LS) - می توانید ذرات منفرد را در یک محدوده اندازه مشخص، هنگام عبور از ناحیه حسگر نوری، تشخیص دهید.

آنالیز پالس چند کاناله (MPA)

هر پالس تولید شده توسط حسگر نوری را تشخیص دهید، ارتفاع آن را اندازه گیری کنید و قطر ذره مرتبط با این مقدار را با درون یابی سریعین نقاط منحنی کالیبراسیون حسگر تعیین کنید.

کنترل کننده نرم افزار

تمام ویژگی ها و خروجی های داده ها در نرم افزار Syngistix for ICP ادغام شده اند و به شما این امکان را می دهند که کارایی آزمایشگاه را بهبود بخشیده و شمارش ذرات را از روشی به روش دیگر فعال یا غیرفعال کنید.



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES

برای تحلیل سایش و فلزات افزودنی

برای آزمایشگاه های با توان عملیاتی بالا که روغن های در حال کار را آزمایش می کنند، سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES اطلاعات مفیدی در مورد سلامت موتور ارائه می دهد.

این سیستم که یک ICP-OES فشرده، همزمان، با دید دوگانه است، از پلاسمای عمودی استفاده می کند و به گونه ای مهندسی شده است که حتی دشوارترین نمونه های با ماتریس بالا را بدون رقیق سازی بررسی کند و بهره وری، عملکرد و بازگشت سریع تر سرمایه گذاری را ارائه دهد. مزایا عبارتند از:

- **مشعل پلازما عمودی** عملکرد سریع و پایدار، نتایج قابل اعتماد و هزینه کم برای هر تجزیه و تحلیل را تضمین می کند
- **صفحه تخت ثابت اختراع شده فناوری پلازما** از نیمی از آرگون سیستم های بار-کویل با همان پلاسمای قوی استفاده می کند
- **سیستم نوری پیشرفته** به طور همزمان داده ها را در مورد بیش از ۷۳ عنصر (طول موج های UV و مرئی) در عرض چند ثانیه برای توان عملیاتی استثنایی نمونه جمع آوری می کند.
- **برش پلازما™ حذف تداخل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری** به طور موثر، قابل اعتماد و اقتصادی، با حذف دود خنک پلازما - بدون استفاده از آرگون - تداخل هارا از بین می برد.
- **پلازما کم دوربین دید** مشاهده مداوم پلازما را ارائه می دهد، توسعه روش را ساده می کند و قابلیت های تشخیص از راه دور را ممکن می سازد.
- **رادیان™ نظارت از راه دور** نظارت بر پارامترهای تشخیصی سیستم شما را به صورت بلادرنگ فراهم می کند و زمان روشن بودن سیستم را به حداکثر می رساند.
- **طراحی جمع و جور** فضای ارزشمند آزمایشگاه را ذخیره می کند

• **مطابقت دارد** مطابق با استانداردهای ASTM D5185، D4951، D6130



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

رقيق کننده های روغن OilPrep

برای شمارش ذرات و آماده سازی نمونه فلزات سایشی

سری OilPrep از رقيق کننده های روغن، نمونه ها را به طور خودکار با نفت سفید (V-Solv) رقيق می کند.™، در آماده سازی برای آنالیز عنصری (توسط ICP-OES) و آنالیز ذرات (توسط SPOS)، مانند سیستم روغن های Avio 500 ICP-OES و شمارنده ذرات مایع LPC 500 مزایا شامل موارد زیر است:

- **توان عملیاتی بالا** - به طور قابل توجهی بهره وری و کارایی را در مقایسه با سیستم های دستی یا تک نوک بهبود می بخشد.
- **انعطاف پذیری** - واریسپان نوآورانه این فناوری، فاصله متغیر پروب نمونه را که به صورت خودکار توسط کامپیوتر کنترل می شود، برای پردازش چند نوکی ظروف نمونه اصلی فراهم می کند.
- **صرفه جویی در زمان** - برخلاف فناوری های جایگزین، حسگر سطح مایع اولتراسونیک PerkinElmer تحت تأثیر ویسکوزیته های نمونه، رنگ یا نور خارجی قرار نمی گیرد.
- **کاهش ضایعات حلال** - استفاده از سرنگ های یکبار مصرف، مراحل وقت گیر شستشوی سرنگ مورد نیاز در سیستم های سرنگ ثابت را حذف می کند، سرعت تولید را افزایش می دهد و حجم حلال هدر رفته را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
- **آلودگی متقاطع به حداقل رسیده است** - استفاده از سرپیت های یکبار مصرف همچنین آلودگی متقاطع را به حداقل می رساند و نتایج مثبت کاذب را که برای آزمایش مجدد به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارند، کاهش می دهد.
- **گردش های کاری بهینه شده** - با کاربرد آسان WinPREP™ این نرم افزار به کاربر امکان انعطاف پذیری در انتخاب نوع ظرف (ویال، بطری، لوله)، تنظیم روش را می دهد و پتانسیل یکپارچه سازی (آنالیز) کاملاً خودکار را فراهم می کند.

آماده سازی روغن ۸

- با رقيق کردن تا ۵۰۰ نمونه در ساعت، یک دستگاه رقيق کننده روغن OilPrep 8 می تواند تقریباً ۴۰۰۰ نمونه را در ۸ ساعت آماده کند.

آماده سازی روغن ۴

- با رقيق کردن تا ۲۵۰ نمونه در ساعت، یک دستگاه رقيق کننده روغن OilPrep 4 می تواند تقریباً ۲۰۰۰ نمونه را در ۸ ساعت آماده کند.

- قابل ارتقا به OilExpress™ سیستم پایش وضعیت روغن برای ارایه آنالیز FT-IR و رقيق سازی روغن در یک پلتفرم واحد.



آماده سازی روغن ۸



آماده سازی روغن ۴

مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

نرم افزار سینجیستیک

یادگیری آسان، استفاده آسان و دوست داشتن آسان

سینجیستیک برای ICP یک نرم افزار مبتنی بر گردش کار است که دارای طراحی منحصر به فرد مبتنی بر آیکون است که پیمایش را ساده می کند و کاربر را در هر تجزیه و تحلیل - از تنظیم گرفته تا جمع آوری داده ها و گزارش نتایج- راهنمایی می کند.

این نرم افزار کاربرپسند و شهودی، کارایی و هماهنگی را برای آزمایشگاه شما به ارمغان می آورد. تمام ویژگی ها و خروجی های داده برای سیستم LPC 500 یکپارچه شده اند، بنابراین شما هر بار بازخورد را در زمان واقعی دریافت می کنید.

شمارش ذرات را می توان از روشی به روش دیگر فعال یا غیرفعال کرد، و می توان قالب های گزارش دهی و اندازه های شمارش ذرات مختلفی را برای انعطاف پذیری بیشتر انتخاب کرد. این روش کارآمد است.



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

خدمات آزمایشگاهی وان سورس

خدمات کامل برای افزایش بهره وری و کارایی

رهبران آزمایشگاه های امروزی با چالش های متعددی روبرو هستند، از ضرب الاجل های فشرده تر گرفته تا بررسی دقیق تر بودجه و تیم هایی با درجات مختلف راحتی در کار با تجهیزات آزمایشگاهی. زمانی که می توانست صرف پیشرفت شود، صرف فعالیت های غیراصلی می شود.

برای کمک به شما در غلبه بر موانع موفقیت، OneSource® خدمات آزمایشگاهی تیمی از دانشمندان و مهندسان آموزش دیده را گرد هم آورده است که دانش واقعی خود را در اختیار شما قرار می دهند و با ارائه توصیه هایی در مورد چگونگی استفاده بهینه از دارایی هایتان، به افزایش بهره وری شما کمک می کنند. با این دانش، می توانید به مأموریت اصلی خود بازگردید.

آزمایشگاه هادر هر اندازه ای باید بدانند که تجهیزاتشان هر بار که روشن می شوند، طبق انتظار کار می کنند. از قراردادهای خدمات نگهداری عملکرد موجود برای دستگاه های ما و همچنین تجهیزات سایر تولیدکنندگان گرفته تا مدیریت کامل دارایی های آزمایشگاهی که به صورت جهانی ارائه می شود، می توانیم به شما کمک کنیم تا از دارایی های مهم آزمایشگاهی خود نهایت استفاده را ببرید.

و برای آزمایشگاه هایی که به دنبال معرفی تجهیزات و تکنیک های جدید هستند، ما آموزش هایی را در مراکز خود و در مراکز شما ارائه می دهیم.



- بهینه سازی دارایی ها
- نظارت بر محیط آزمایشگاه و ابزار
- محل دارایی
- آموزش و پرورش فناوری و تحلیل توصیفی
- اینترنت اشیا/آزمایشگاه آینده
- پشتیبانی از راه دور
- خدمات چندفروشنده
- انطباق
- پشتیبانی آزمایشگاهی
- راهکارهای فناوری اطلاعات
- صلاحیت های ابزار

درباره ما بخوانید
چندفروشنده ای و
خدمات آموزشی



مقدمه



گردش کار



کاربردها



فناوری



نرم افزار



خدمات



انفورماتیک



مواد مصرفی



تماس با ما



خدمات چندفروشندگی

باوجود این همه ابزار از فروشندگان مختلف در آزمایشگاه شما، اطمینان از اینکه همه چیز به درستی نگهداری می شود، می تواند چالش برانگیز باشد. برخی از آزمایشگاه ها برای به دست آوردن بیشترین بهره وری و کارایی از تمام ابزارهای خود تلاش می کنند. برخی دیگر، گردش کار را ساده و روان می کنند تا انطباق با مقررات را حفظ کنند - و خطر عدم انطباق را کاهش دهند. در هر صورت، شما همیشه در تلاش هستید تا بفهمید که قبل از اینکه زمان و هزینه زیادی را از دست بدهید، چه کسی را برای خدمات در اسرع وقت فراخوانی کنید.

اماچه می شد اگر یک گزینه قرارداد خدمات یک مرحله ای برای آزمایشگاه شما وجود داشت - از شرکتی با دهه ها تجربه عمیق در زمینه چندفروشندگی - که تمام ابزارهای شما را تعمیر می کرد، خدمات اعتبارسنجی و انطباق پیشرفته ارائه می داد و تعمیر و نگهداری پیشگیرانه قابل اعتمادی را فراهم می کرد؟ بله، وجود دارد. این همان چیزی است که سرویس چندفروشندگی OneSource در مورد آن صحبت می کند.

خدمات آموزشی

چه به دنبال یک دوره آموزشی مقدماتی آشنایی با ابزار دقیق، تکنیک های عیب یابی ساده، پشتیبانی عمومی از کاربردها یا بهینه سازی روش ها باشید، دانشمندان یا مهندسان خدمات میدانی ما مستقیماً به آزمایشگاه شما خواهند آمد.

ازطریق آموزش، شما دانش و بینشی در مورد جدیدترین تکنیک ها به دست خواهید آورد، که نه تنها اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد، بلکه پتانسیل کامل ساز شما را نیز آزاد می کند.



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما



انفورماتیک

سوالات هوشمندانه تر، پاسخ های سریع تر

به دنبال نرم افزار انفورماتیک پیشرو در صنعت هستید؟ بله، ما آن را هم داریم. بر چالش هایی مانند قیمت گذاری ناپایدار، افزایش مقررات زیست محیطی و پیچیدگی داده ها غلبه کنید. مجموعه نرم افزارهای انفورماتیک ما را مرور کنید و همکاری را بهبود بخشید، نوآوری در تحقیق و توسعه را برانگیزید و تجزیه و تحلیل های پیش بینی کننده را در زمان واقعی ارائه دهید.

کم دراو

سرعت بخشیدن به ترسیم و انتشار ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی. با میانبرهای مفید، کلیدهای میانبر، هوش شیمیایی صرفه جویی در زمان و قالب های گرافیکی مناسب برای انتشار، زمان بیشتری برای آنچه مهم است - علم خود - خواهید داشت.

تیبکواسپات فایر®

به سرعت داده های پراکنده از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل کنید و تصویری کامل از آنچه در حال رخ دادن است را به صورت بلادرنگ ایجاد کنید. این نرم افزار به طور کامل نحوه کار شما را متحول می کند و به شما امکان می دهد منابع داده پراکنده را به هم متصل کرده و بینش های جدیدی را کشف کنید - همه اینها در عرض چند دقیقه.



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

مواد مصرفی

از سازهایتان نهایت استفاده را ببرید و تحلیل شما

شماتلاش های زیادی را صرف تحقیقات خود می کنید - و ما همین کار را با مواد مصرفی و لوازم جانبی خود انجام می دهیم، آزمایش و اعتبارسنجی می شوند تا با نیازهای تجزیه و تحلیل روانکار شما مطابقت داشته باشند. به همین دلیل است که ما طیف کاملی از مواد مصرفی با کیفیت مانند V-Solv را توسعه داده ایم.™ حلال ICP، مایع تأیید شمارش ذرات و مایع کالیبراسیون شمارش ذرات که فقط برای آنالیز روانکار طراحی شده اند.

برای یافتن محصولاتی که عملکرد قابل اعتماد، کنترل هزینه های عملیاتی و حداکثر زمان آماده به کار ابزارهای شما را ارائه می دهند، به سبد محصولات مصرفی ما نگاهی بیندازید. مانند ابزارهای مورد اعتماد ما، مواد مصرفی ما نیز بارها و بارها بهترین عملکرد را ارائه می دهند.

درست انتخاب کن
مواد مصرفی برای
تحلیل امروز شما



پروب نمونه برای کاربردهای ذرات

پروب نمونه ذرات، یک پروب بدون گرفتگی است که تشکیل حباب را از بین می برد. این پروب با قطر داخلی یکسان در سراسر طول پروب طراحی شده است که امکان ثبات سرعت جریان را فراهم می کند و برای تجزیه و تحلیل شمارش ذرات ایده آل است.

مزایا شامل موارد زیر است:

- به راحتی قابل تعویض
- گرفتگی را کاهش می دهد
- تمیز کردن آسان



استانداردهای متالو-آلی

مواد مرجع با کیفیت بالا برای اندازه گیری دقیق تحلیلی و کنترل کیفیت ضروری هستند و تضمین می کنند که تصمیمات صحیح بر اساس داده های قابل اعتماد گرفته می شوند.

استانداردهای متالو-ارگانیک ما به گونه ای طراحی شده اند که هنگام تجزیه و تحلیل نمونه های دشوار، اطمینان لازم را به شما بدهند.

مشعل ارگانیک HybridXLT

مشعل سه شیاره HybridXLT™ ما، که طراحی منحصر به فردی است و فقط توسط PerkinElmer ارائه می شود، بالاترین عملکرد را برای طیف سنج Avio ICP-OES شما فراهم می کند و برای کاربردهای تست روان کننده در چین کار ایده آل است.



مقدمه

گردش کار

کاربردها

فناوری

نرم افزار

خدمات

انفورماتیک

مواد مصرفی

تماس با ما

شرکت پرکین المر

خیابان وینتر، پلاک ۹۴۰
والتام، ماساچوست 02451 ایالات متحده
آمریکانتهن: (800) 4000-762 یا (1+)
4602-925-203
www.perkinelmer.com

برای مشاهده فهرست کامل دفاتر جهانی ما، به www.perkinelmer.com/ContactUs مراجعه کنید.

کپی راییت©2019، شرکت PerkinElmer، تمامی حقوق محفوظ است. PerkinElmer® یک علامت تجاری ثبت شده PerkinElmer, Inc. است. سایر علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشند.

رئیس‌انستیتو بیوس

۱۴۸۸۱_۰۴

برای اطلاعات بیشتر در مورد راهکارهای تست روانکار ما، به www.perkinelmer.com/lubricants مراجعه کنید.

