

پرتن اینفراماتیک ۹۵۰۰ آنالایزر غلات و آرد NIR



IAOM4 تکنفرانس و نمایشگاه منطقه ای سالانه جنوب شرقی آسیا، شهر هی چی مین، ویتنام،
اکتبر ۲۰۱۳

اینفراماتیک ۹۵۰۰ - آنالایزر ترکیبی غلات و آرد

غلات

- مرتب سازی غلات بر اساس کیفیت
- رطوبت، پروتئین، گلوتن مرطوب، Zeleny
- وزن هکتولیترا / وزن آزمایشی اختیاری
- تحلیل پرداخت

آرد- با ماژول آرد اختیاری

- کنترل کیفیت در حین آسیاب کردن و تعیین مشخصات آرد نهایی
- رطوبت، پروتئین، خاکستر، گلوتن مرطوب، زلنی، سفیدی آرد L*





تجزیه و تحلیل دانه

-طراحی شده برای کاربران غلات

- از صفحه نمایش لمسی رنگی بزرگ ۱۲ اینچی استفاده کنید
- سریع و ساده!
- رابط کاربری به زبان های محلی متعدد



۳. حذف




۲. پور




۱. انتخاب کنید


گندم- عملکرد رطوبت (غله کامل)

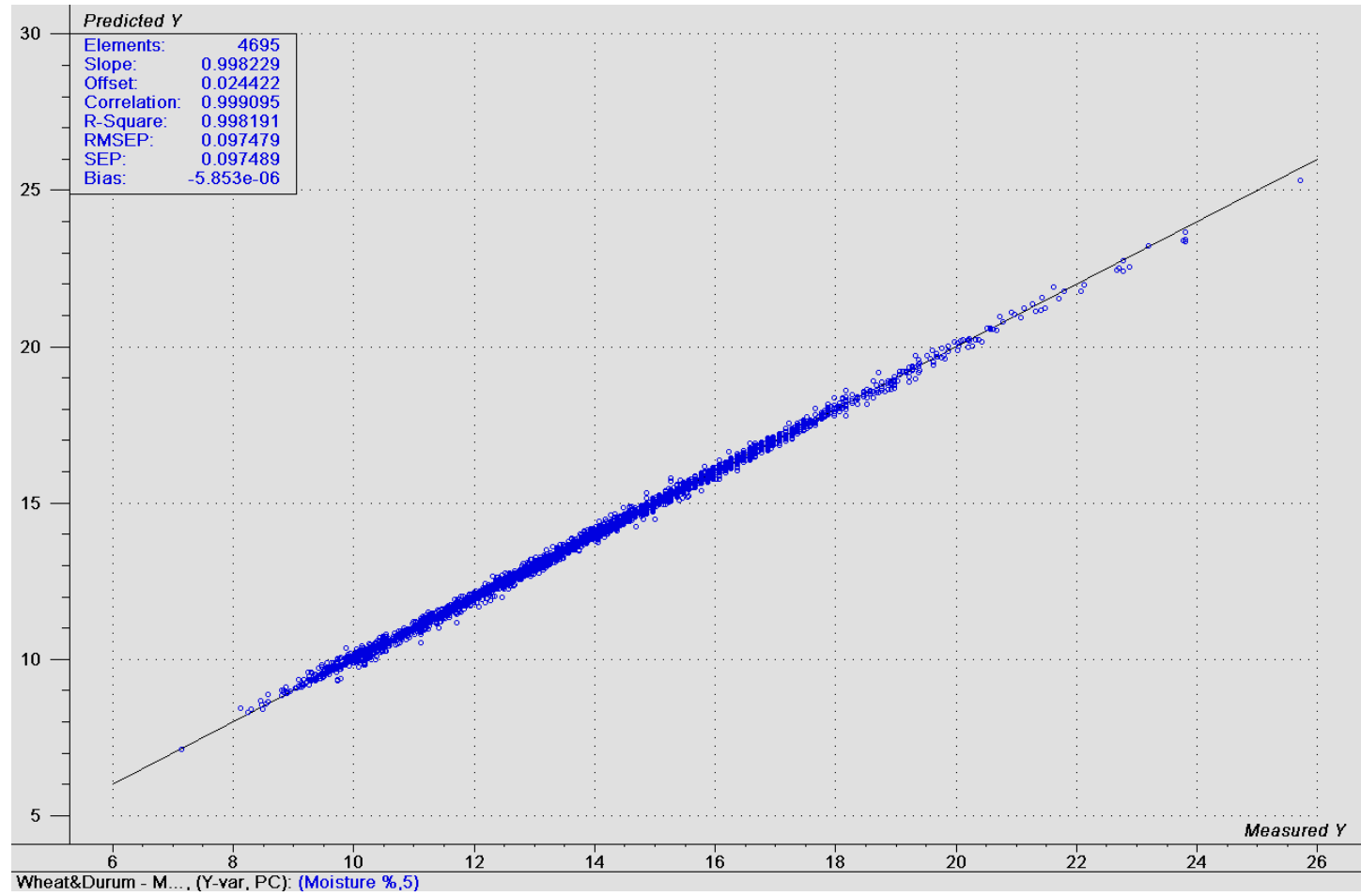


گندم- عملکرد رطوبت (غله کامل)

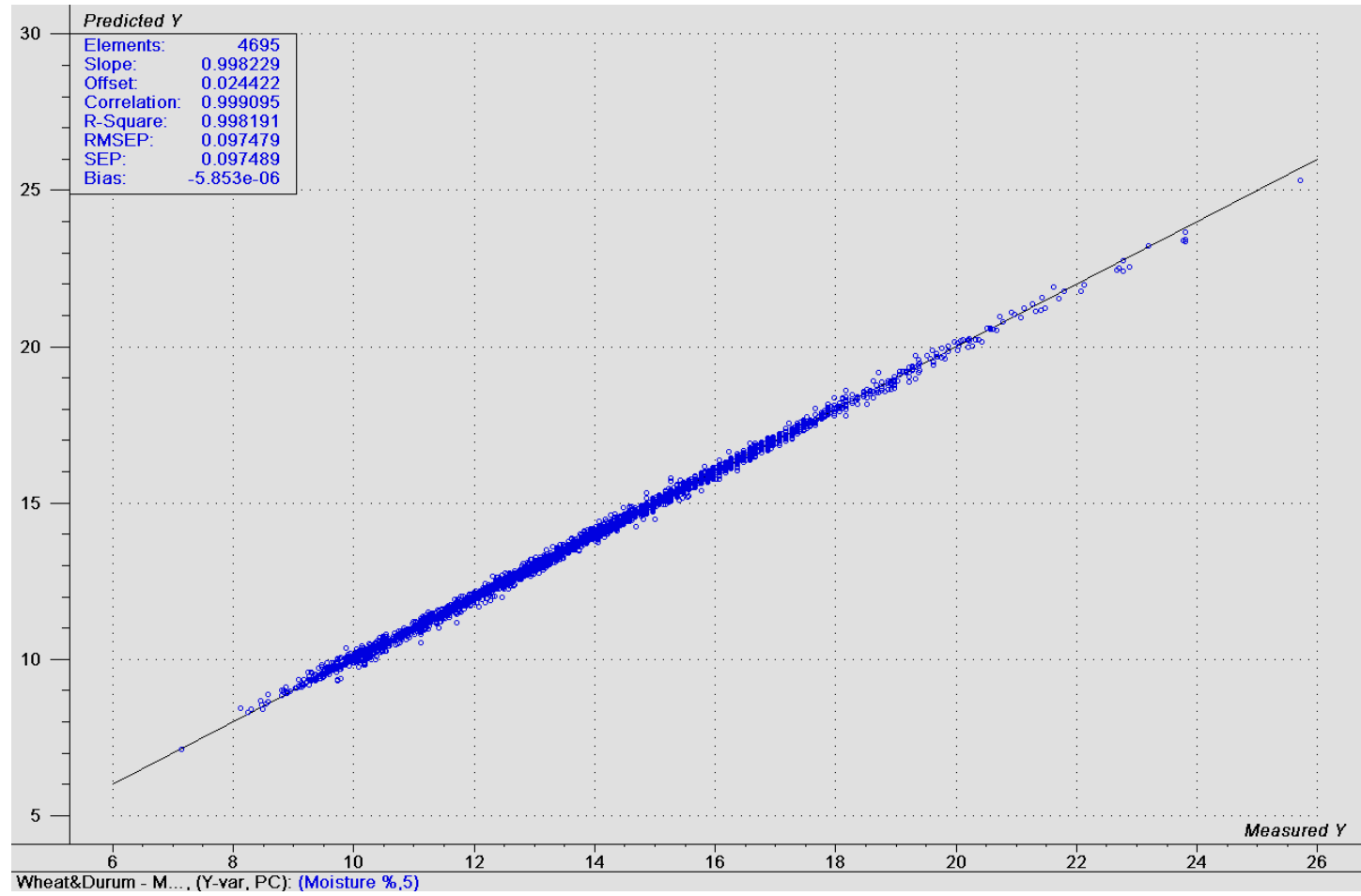


گندم- عملکرد رطوبت (غله کامل)

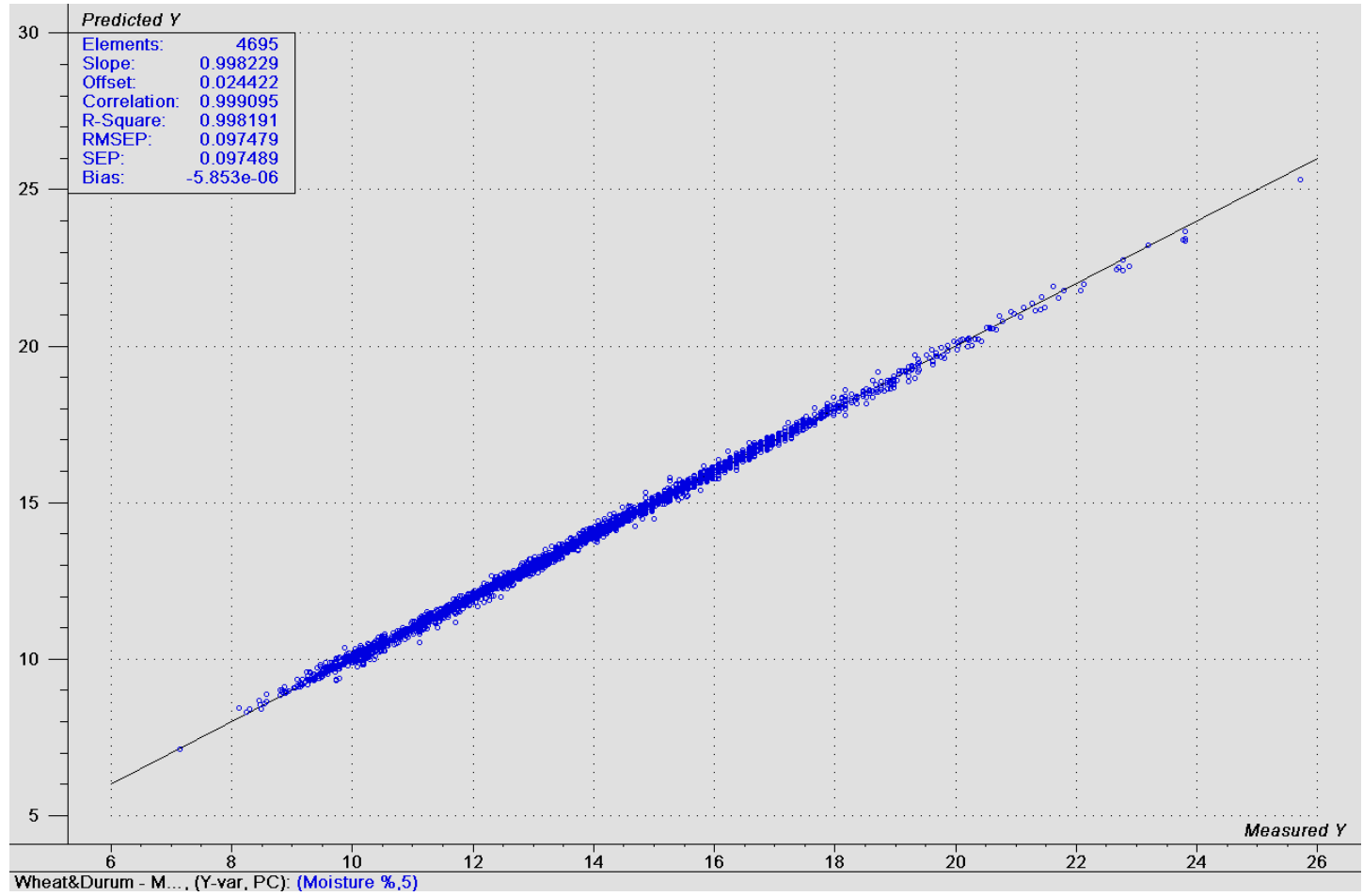

عملکرد گندم - پروتئین خشک (غلالت کامل)

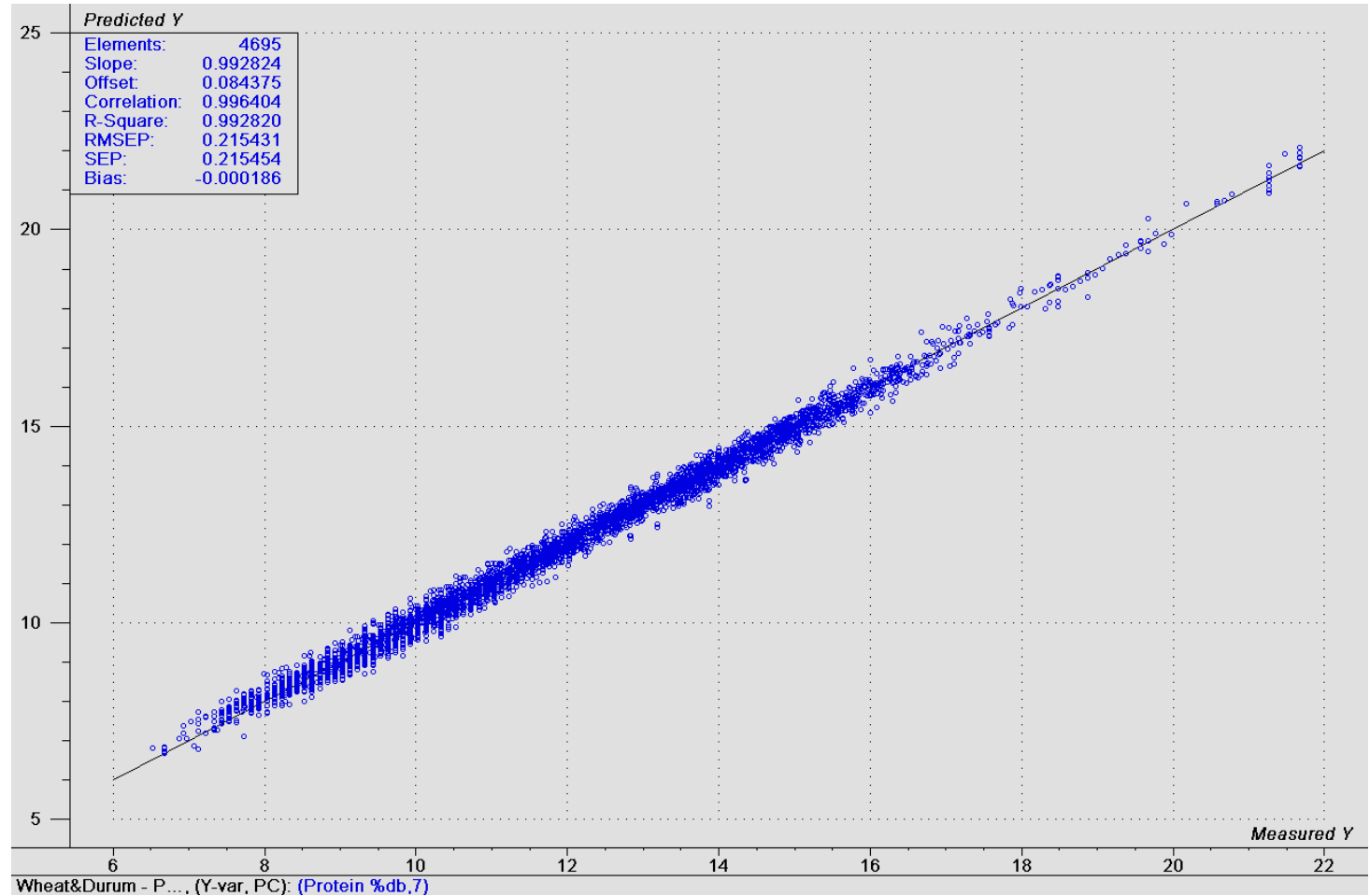


لوازم جانبی آنالیز آرد IM 9500

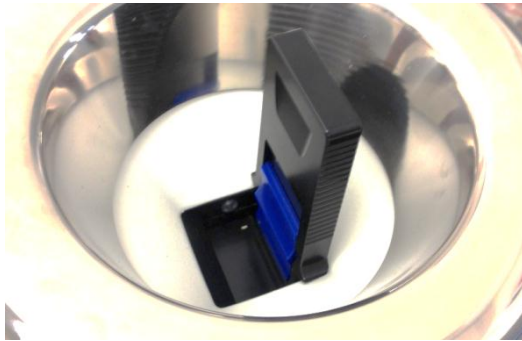

۳.



۲.

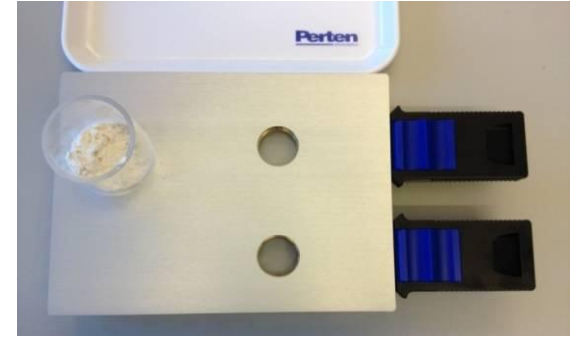


۱.

۱. کیت لوازم جانبی اختیاری برای آنالیز آرد
- ماژول های آرد و بارکننده آرد
۲. بارگذاری آسان ماژول های آرد
۳. فقط ماژول آرد را در قیف قرار دهید
۴. نتایج را بخوانید **۱۰ ثانیه!**


۴.



گندم- عملکرد رطوبت (آرد)

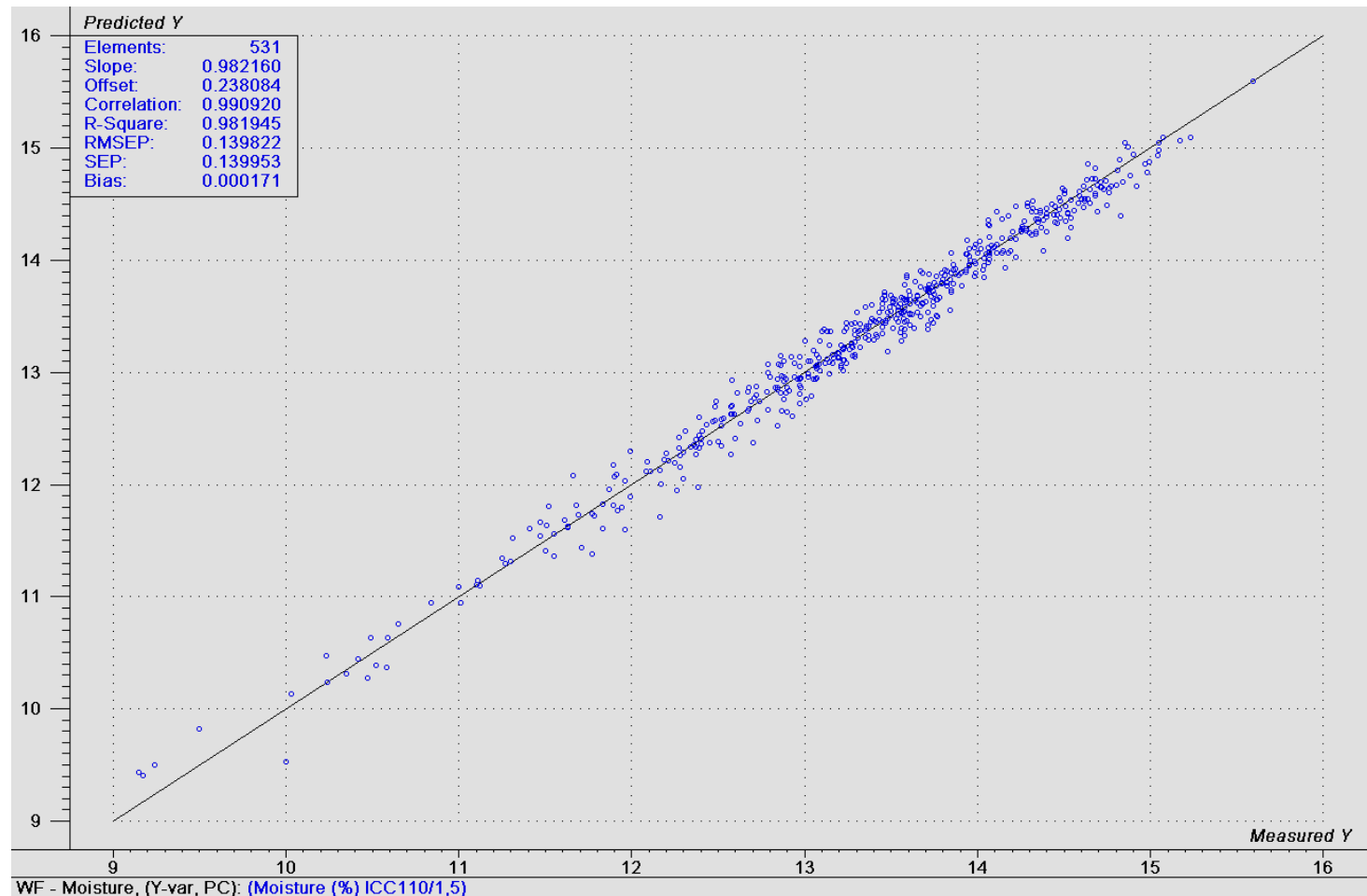

عملکرد گندم - پروتئین بر اساس خشک (آرد)

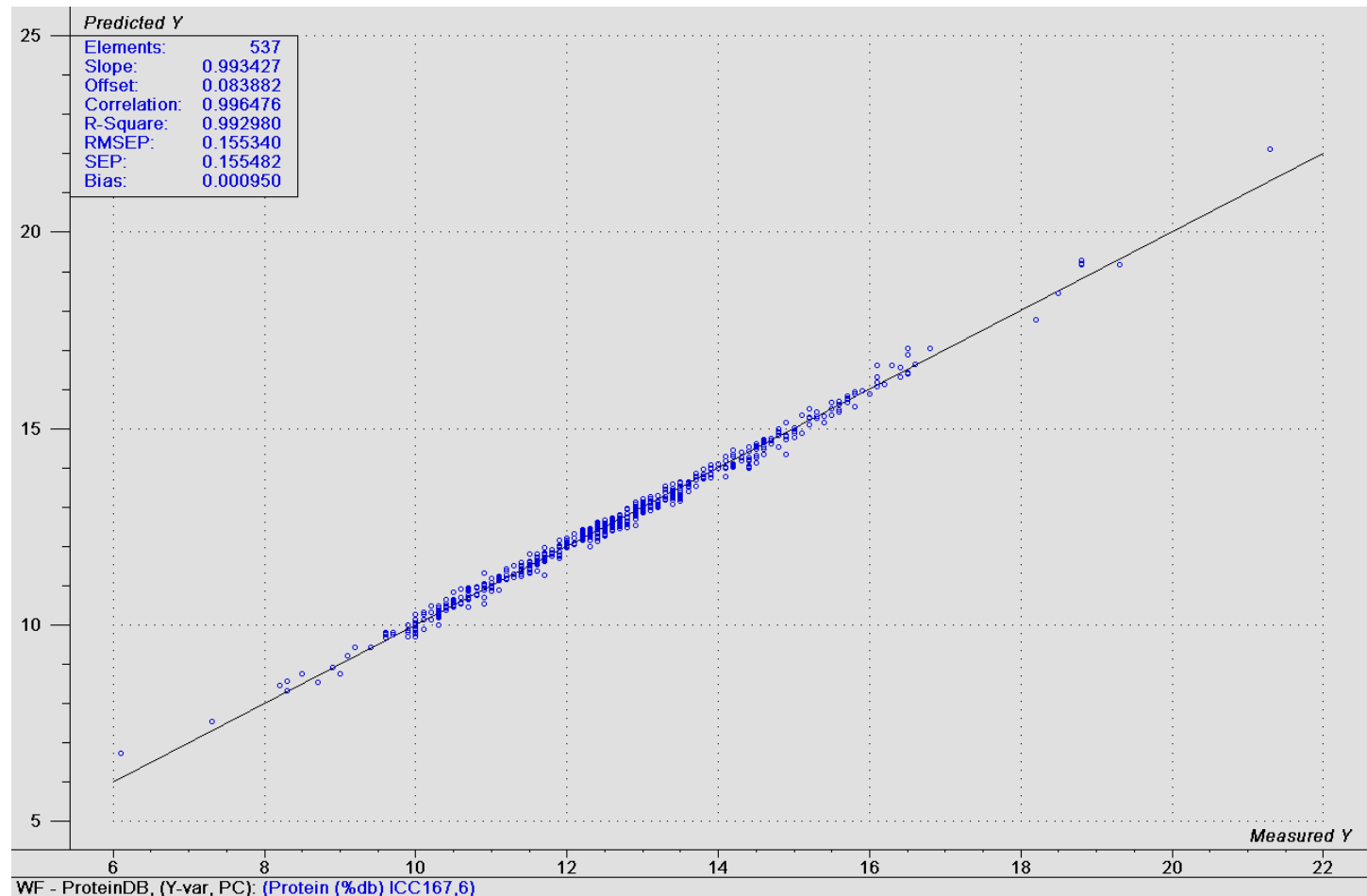

کالیبراسیون های قابل انتقال IM 9500 با طراحی نوری و قابلیت ردیابی NIST



- یک سیستم مونوکروماتور
بلوک جامد
- مقیاس طول موج قابل ردیابی با
NIST SRM2065



National Institute of Standards & Technology

Certificate of Analysis

Standard Reference Material® 2065

Ultraviolet-Visible-Near-Infrared Transmission
Wavelength/Vacuum Wavenumber Standard

کالیبراسیون های استاندارد شامل می شود



- کالیبراسیون های استاندارد موجود در زمان خرید ارائه می شوند
- گندم و دانه دوروم
- کالیبراسیون های جهانی از پایگاه داده بین المللی بزرگ بیش از ۵۰۰۰ نمونه با عملکرد اثبات شده
- رطوبت، پروتئین، وزن هکتولیتتر/وزن آزمایشی اختیاری
- کالیبراسیون های اضافی موجود است
- آرد سفید و غذای کامل
- رطوبت، پروتئین، خاکستر، سفیدی آرد L*
- کالیبراسیون های اضافی موجود است

کالیبراسیون بر اساس روش های استاندارد بین المللی

- کالیبراسیون غلات بر اساس بیش از ۵۰۰۰ نمونه با همکاری بالابرهای غلات اصلی و آزمایشگاه ها یا مؤسسات تحلیلی توسعه یافته است.
- از جمله گندم/گندم دوروم از استرالیا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا.
- کالیبراسیون آرد بر اساس آردهای ۱۲ کشور و تقریباً ۴۰ کارخانه آرد مختلف انجام می شود.
- آرژانتین، استرالیا، اتریش، چین، فرانسه، آلمان، ژاپن، لهستان، اسپانیا، سوئد، سوئیس و ایالات متحده آمریکا.
- کالیبراسیون ها با موفقیت در چندین کشور دیگر آزمایش شده اند.



نمونه مرجع بررسی پلت برای تضمین کیفیت

- از نمونه های بررسی روزانه خودتان استفاده کنید یا: **از نمونه مرجع بررسی پلت استفاده کنید**
- تأیید می کند که IM9500 با استانداردهای کارخانه مطابقت دارد - تضمین کیفیت برای ISO یا موارد دیگر
- مناسب برای استفاده تا یک سال پس از خرید



سیستم های کنترل کیفیت (QA).

شبکه NIR



- می تواند با استفاده از کابل اترنت یا (اختیاری) دسترسی بی سیم به اینترنت متصل شود IM9500
- استفاده از TeamViewer و اتصال از راه دور، امکان خدمات و پشتیبانی سریع و مقرون به صرفه را فراهم می کند.
- تشخیص و حل مشکلات با اجرای برنامه های آزمایشی از راه دور و بررسی فایل ها و تنظیمات سیستم
- به روزرسانی های ساده نرم افزار و کالیبراسیون
- دانلود و آپلود داده ها برای کمک به تنظیم سوگیری در صورت نیاز

پرتن کیست؟

ماموریت ما این است کہ:

ارائہ راہکارهایی کہ بہ صنعت کمک
می کنند تا محصولات کشاورزی/غذایی با
کیفیت بالا را بہ طور موثر تولید کند

این منجر بہ:

بہبود بہرہ وری تولید، کیفیت
محصول و سودآوری در صنایع غلات،
آرد، مواد غذایی و خوراک دام



طيف محصولات Perten Instruments



پشتیبانی پرتن

The screenshot shows a software interface for product analysis. It includes a dropdown menu for 'Prod.' with 'Trigo Blando' selected. Below it, 'ID muestra' is set to '123456'. Two data fields are displayed: 'Humedad (%)' with a value of '9.6' and 'Proteína (%ss)' with a value of '10.5'. To the right of these fields are buttons for 'Sel. prod.', 'Repetir', 'ID muestra+1', 'Imprimir', and 'Opciones'. At the bottom, there is a green progress bar and a status bar with the text '01-WHT-MPO-v5.SPF' and a timestamp '09:44'. A small window titled 'Session list' is also visible in the bottom right corner.



اگر چیزی پیش برود
اشتباه کردم چی؟

انجام دادن؟


مایک شبکه جهانی از توزیع کنندگان آموزش دیده در زمینه محصولات خود داریم. آنها در زمینه خدمات، تعمیرات و پشتیبانی محلی به ما کمک می کنند.

در موارد خاص، ما از طریق دفتر مرکزی و از طریق بخش networknig پشتیبانی ارائه می دهیم.

نقشه پرتن



از توجه شما متشکریم. برای کسب
اطلاعات بیشتر به میز ۱۵ خوش آمدید.

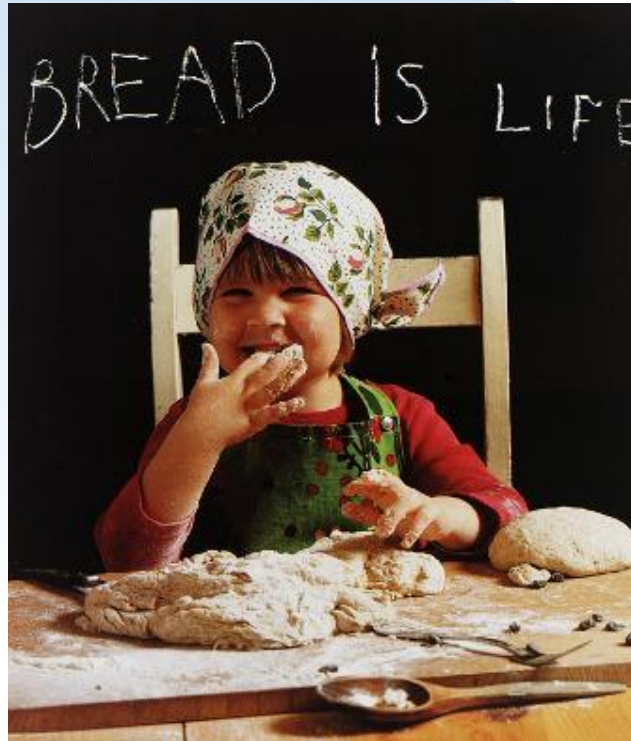

شریک شما در کنترل کیفیت مواد غذایی کشاورزی